
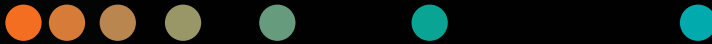


# Skalierbarer und minutenschneller Nachweis von COVID-19-Antigenen

Der Ausbreitung des Virus einen Schritt  
voraus bleiben


siemens-healthineers.de

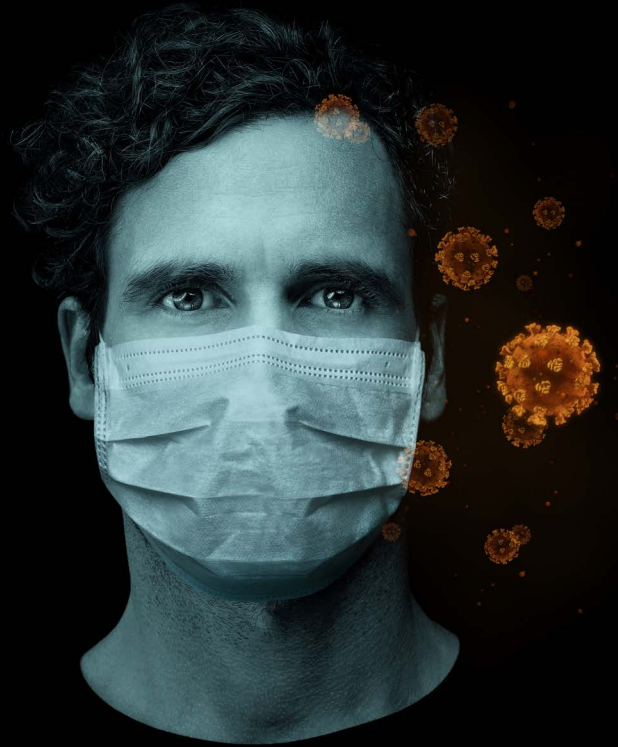

## CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Jetzt mit einfacher  
Probenentnahme

Der von Siemens Healthineers vertriebene CLINITEST® Rapid COVID-19 Lateral Flow Antigen-Schnelltest wird visuell abgelesen, ist einfach anzuwenden und liefert bereits nach 15 Minuten Ergebnisse. Zur Durchführung werden keine Laborfachkräfte und keine speziellen Laborinstrumente benötigt – der Test kann von eingewiesenen Fachkräften durchgeführt werden. Als Teil einer umfassenderen Strategie kann der CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der Ausbreitung des Virus einen Schritt voraus zu bleiben.

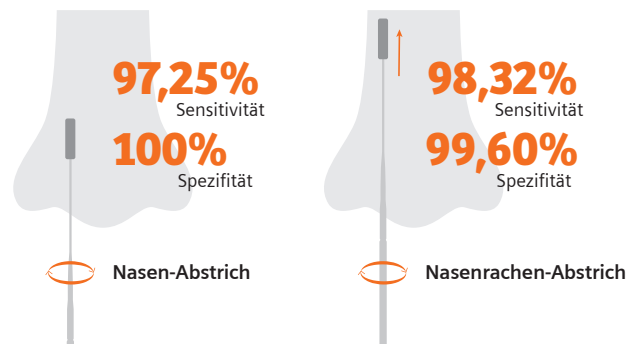

### Schnelle und zuverlässige Testergebnisse

Zuverlässige Ergebnisse in nur 15 Minuten



### Skalierbare Testungen für die Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen

Testdurchführung direkt vor Ort – dort, wo Ergebnisse am dringendsten benötigt werden



### Überwindung häufiger Zugangsbarrieren

Keine Laborfachkräfte bzw. speziellen Laborinstrumente notwendig; zwei Abstrichverfahren stehen zur Auswahl

## Weitere Informationen zum Produkt

Die klinische Leistung des CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Tests wurde an sieben Standorten in den USA evaluiert, an denen sich Patienten zur Teilnahme bereit erklärten und getestet wurden. Die Tests wurden standortübergreifend, in unterschiedlichen klinischen Umfeldern und durch verschiedene Anwender durchgeführt. Die gewonnenen Datensätze sowohl für die Nasenrachen-Abstriche als auch für die Nasen-Abstriche erfüllen die derzeit aktuellen Bestimmungen von Regulierungsbehörden und lassen eine ausgezeichnete Leistung erkennen.

### Leistungsdaten Nasenrachen-Abstrich

Verfahren	PCR (Nasenrachen-Abstrich)			Gesamtergebnisse
	Ergebnisse	Positiv	Negativ	
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (Nasenrachen-Abstrich)	Positiv	117	3	120
	Negativ	2	743	745
	<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>746</b>	<b>865</b>

Relative Sensitivität: 98,32 % (95 % KI: \* 94,06 % bis 99,80 %)

Relative Spezifität: 99,60 % (95 % KI: \* 98,83 % bis 99,92 %)

Genauigkeit: 99,42 % (95 % KI: \* 98,66 % bis 99,81 %)

\*Konfidenzintervall

### Leistungsdaten Nasen-Abstrich

Verfahren	PCR (Nasen-Abstrich)			Gesamtergebnisse
	Ergebnisse	Positiv	Negativ	
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (Nasen-Abstrich)	Positiv	106	0	106
	Negativ	3	128	131
	<b>Gesamt</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>237</b>

Relative Sensitivität: 97,25 % (95 % KI: \* 92,17 % bis 99,43 %)

Relative Spezifität: 100 % (95 % KI: \* 97,16 % bis 100 %)

Genauigkeit: 98,73 % (95 % KI: \* 96,35 % bis 99,74 %)

\*Konfidenzintervall



### Spezifikationen

- Zeit bis zum Testergebnis: 15 Min.
- Probentyp: Nasenrachen-Abstrich oder Nasen-Abstrich
- Lagerung: Raumtemperatur oder gekühlt (2–30°C)
- Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
- Antigen-Nachweis: Nukleokapsid-Protein

CLINITEST und alle damit verbundenen Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens Healthcare Diagnostics Inc. oder anderer Unternehmen der Siemens Healthineers Gruppe. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Das Produkt wird aktuell von der FDA für eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) geprüft und ist in den USA nicht im Handel erhältlich. Die Produkterhältlichkeit kann von Land zu Land variieren. Vertrieb durch Siemens Healthineers.

### Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127  
91052 Erlangen, Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
siemens-healthineers.de

### Local Contact Information

Siemens Healthcare GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 12  
65760 Eschborn, Germany  
Phone: +49 6196 7713-1111  
healthcare.siemens.de/laboratory-diagnostics